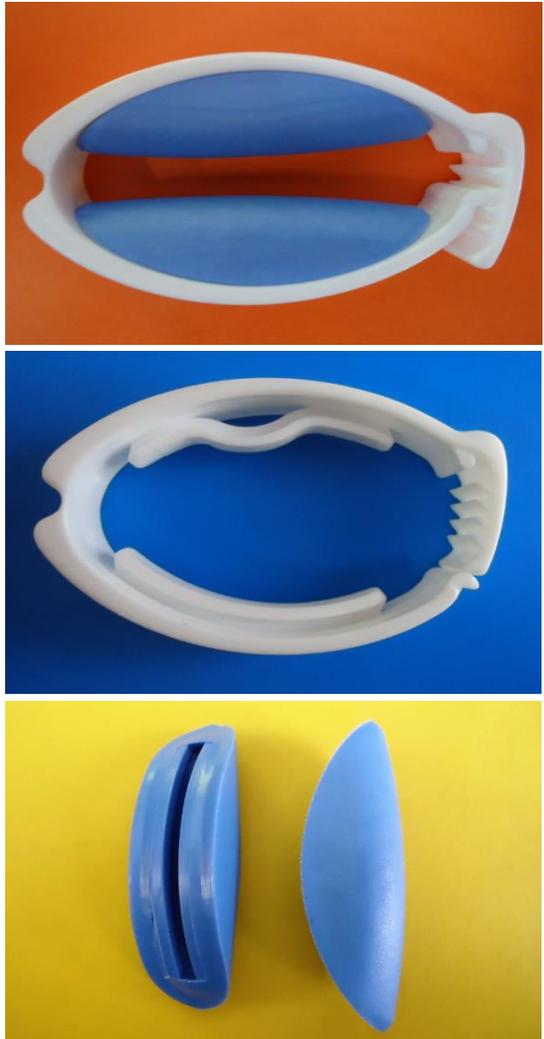


# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>NOMBRE</b>	JUEGO UROCLAMP	
<b>LÍNEA</b>	Moldeo por inyección	
<b>DESCRIPCION</b>	<p>Producto conformado por tres componentes:</p> <p>a) una base rígida elaborada en polipropileno pigmentado de forma ovoide, con soportes internos para los componentes flexibles y cierre ajustable de cuatro niveles con enganche mediante estrías o dientes.</p> <p>b) dos componentes flexibles que actúan como almohadillas, elaborados en PVC D40-D50 pigmentado, con forma semicircular, acanalados por uno de sus lados y sección interna hueca para permitir su ensamblaje en los soportes internos de la base rígida.</p>	
<b>CARACTERISTICAS</b>	<p><b>Dimensiones:</b>  <b>Base Rígida</b>            71 mm x 15 mm x 43 mm x 39 mm  <b>Componente Flexible:</b>            52 mm x 13,5 mm x 10,5 mm</p> <p><b>Color:</b>            blanco, azul</p> <p><b>Acabado:</b> producto sin deformación, no escaso, no quemado, sin rebaba, sin contaminantes ni puntos negros y alabeo mínimo.</p> <p><b>Marcación producto:</b>            "APORTE MÉDICO"</p> <p><b>Peso aproximado unidad ensamblada:</b>            17,0 gramos</p>	
<b>APLICACIÓN</b>	Producto de aplicación médica empleado en tratamiento de incontinencia urinaria masculina	
<b>ALMACENAJE</b>	Lugar cubierto y seco, a temperatura ambiente, protegido del polvo y la luz UV.	
<b>EMBALAJE</b>	Bolsa plástica y caja de cartón	
<b>UNIDAD DE EMPAQUE</b>	200 unidades a granel	